



Svegliati con *Sonata*!

Sappiamo quanto importante sia dormire bene e il letto *Invacare Sonata* è stato concepito proprio con lo scopo di garantire un buon riposo.

Il letto *Sonata* si propone come un letto dal design eccellente che può essere facilmente personalizzato a seconda del contesto in cui deve essere inserito: dall'ambiente domiciliare a quello istituzionale.

La gamma del letto *Sonata* incontra tutte le possibili esigenze dei pazienti garantendo il massimo comfort. Questo grazie alla possibilità di scegliere tra una molteplicità di elementi diversi: dalla rete disponibile con o senza gambe, all'ampia varietà di pannelli fino al tipo di movimentazione, manuale o elettrica.

Come tutti i prodotti *Invacare*, il letto *Sonata* è un ausilio affidabile, costruito secondo alti standard qualitativi.

Disponibile nella versione configurata e modulare.



Yes, you can.®

Sonata configurato*Invacare Sonata 1***Letto a 1 manovella per regolazione dell'alzatasta**

- Struttura in tubo rettangolare in acciaio verniciato epossidico
- Rete con doghe metalliche 2 snodi
- Testata e pediera smontabili verniciate o cromate
- Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe
- Pannelli in nobilitato con bordatura in ABS tinta faggio
- Predisposto per l'applicazione di sponde

Codice NT: 18.12.07.003**Nr. Repertorio DM: 102892/R***Invacare Sonata 3***Letto a 2 manovelle per regolazione dell'alzatasta e dell'alzagambe**

- Struttura in tubo rettangolare in acciaio verniciato epossidico
- Rete con doghe metalliche 3 snodi
- Testata e pediera smontabili verniciate o cromate
- Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe
- Pannelli in nobilitato con bordatura in ABS tinta faggio
- Predisposto per l'applicazione di sponde

Codice NT: 18.12.07.006**Nr. Repertorio DM: 103164/R***Invacare Sonata A***Rete a due manovelle senza gambe+basamento oleodinamico**

- Rete a 2 manovelle per regolazione dell'alzatasta e dell'alzagambe
- Struttura in tubo rettangolare in acciaio verniciato epossidico
- Rete con doghe metalliche 3 snodi
- Struttura regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica
- Pannelli Nadine tinta faggio
- Predisposto per l'applicazione di sponde

Codice NT: 18.12.07.006+18.12.12.106+codici ISO aggiuntivi**Nr. Repertorio DM: 104157/R***Invacare Sonata B***Rete a motore senza gambe+set testata pediera Valeria**

- Rete collegata a telaio articolato a 3 snodi a motore
- Struttura in tubo rettangolare in acciaio verniciato epossidico
- Rete con doghe metalliche 3 snodi
- Set testata/pediera Valeria
- Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe
- Pannelli in nobilitato con bordatura in ABS tinta faggio
- Predisposto per l'applicazione di sponde

Codice NT: 18.12.10.003+codici ISO aggiuntivi**Nr. Repertorio DM: 103211/R***Invacare Sonata C***Rete a motore senza gambe+basamento a motore**

- Rete collegata a telaio articolato a 3 snodi a motore
- Struttura in tubo rettangolare in acciaio verniciato epossidico
- Rete con doghe metalliche 3 snodi
- Pannelli Nadine tinta faggio
- Alzatasta e alzagambe regolabile con pulsantiera
- Predisposto per l'applicazione di sponde

Codice NT: 18.12.10.003+18.12.12.103+codici ISO aggiuntivi**Nr. Repertorio DM: 103297/R**

Sonata modulare



Sonata con pannelli Vibeke, sponde abbattibili Verso, alzamalati e ruote (**Sonata** Modulare).



Sonata con pannelli Nadine, sponde abbattibili Verso e ruote (**Sonata** modulare).



Sonata con pannelli Kirsty, sponde in legno e gambe regolabili in altezza (**Sonata** modulare).

Modularità, affidabilità

Il letto **Sonata** è completamente modulare. E' disponibile nella versione a 2 o 4 sezioni, con doghe in metallo o in legno, con movimentazione manuale o elettrica.

Il letto **Sonata** è facile da montare e da trasportare grazie ai suoi componenti leggeri e modulari.



Doghe
Doghe in metallo o in legno.



Ruote
Ruote da 100 mm o da 125 mm.

Tipo rete



Rete a due sezioni



Rete a quattro sezioni

Versione manuale / elettrica



Manuale
Movimentazione con una manovella (rete a due sezioni) o con due manovelle (rete a 4 sezioni).




Elettrica
Movimentazione elettrica delle sezioni alzatesta e alzagambe (rete a 4 sezioni).

Tipo di gambe / basamento



Set gambe ad altezza fissa 500 mm, con o senza gambe.

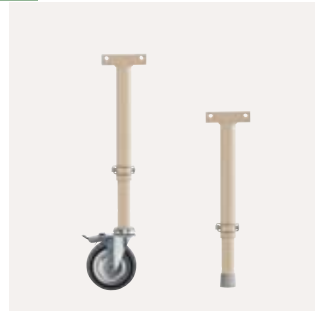

Set gambe ad altezza variabile con o senza ruote.



Gambe e pannelli a corpo unico, con o senza ruote.





	Valeria	Nadine	Sabrina	Vibek_{ENG}	Kirsty
Legno / colore	Laminato faggio	Laminato faggio	Faggio / Ciliegio	Faggio / Ciliegio	Faggio / Ciliegio
Compatibile con sponde Verso	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibile con sponde ribaltabili Rebecca	✓	✓			
Compatibile con sponde Nina					✓

Dati tecnici



Sonata

Larghezza totale ¹ : 900 mm	Lunghezza esterna ¹ : 2080 mm	Altezza rete con pannello Valeria 440 e 500 mm	Altezza rete con gambe ad altezza variabile: -senza ruote 360 / 430 / 500 mm -con ruote ² 490 / 560 / 630 mm	Angolo alzatasta: da 0° a 72°	Angolo sezione centrale: da 0 a 30°	Angolo alzapiedi: massimo 15°
Larghezza interna: 890 mm	Lunghezza interna: 2010 mm					
Rete: 900 mm	Rete: 2000 mm					



Sonata


Rete a due sezioni: 41 Kg	Portata di carico massimo (comprensivo di materasso, sponde, alzamalati e paziente) 170 Kg	Variazione dell'altezza del basamento: 530 - 770 mm
Rete a tre e quattro sezioni: 48 Kg		

1/ Nota: la misura può differire a seconda del tipo di pannelli prescelti.

2/ Nota: ruote diametro 100 mm (forcella metallica); + 10 mm con forcella in plastica.

NB/ Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Colore del telaio e dei pannelli



Avorio RAL 1015



Faggio



Ciliegio

	Sonata-manuale	Sonata-rete elettrica	Sonata-con regolazione altezza manuale ed elettrica
Codici NT	Sonata 1 (letto 1 manovella): 18.12.07.003	Sonata B (rete a motore con set gambe): 18.12.10.003	Sonata A (rete 2 manovelle +basamento oleodinamico) : 18.12.07.006+18.12.12.106
	Letto 1 manovella con ruote: 18.12.07.003+24.36.06.103	Rete a motore con gambe con ruote: 18.12.10.003+24.36.06.103	Rete due manovelle+basamento oleodinamico con ruote: 18.12.07.006+18.12.12.106+24.36.06.103
	Sonata 3 (letto 2 manovelle): 18.12.07.006		Sonata C (rete a motore con basamento a motore): 18.12.10.003+18.12.12.103
	Letto 2 manovelle con ruote: 18.12.07.006+24.36.06.103		Rete a motore con basamento a motore con ruote: 18.12.10.003+18.12.12.103+24.36.06.103
Nr. Repertorio DM	Sonata 1: 102892/R Sonata 3: 103164/R	Sonata B: 103211/R	Sonata A: 104157/R Sonata C: 103297/R