

Aquatec® | **Sedie da doccia**



*Aquatec **Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip***

Aquatec offre un'ampia gamma di soluzioni per il bagno grazie alla grande varietà di sedie da doccia.

AQUATEC®



Yes, you can.®



Aquatec **Ocean**

Sedia per WC e doccia

- Telaio in acciaio inossidabile, anticorrosione
- Seduta regolabile in altezza da 480 mm a 600 mm senza attrezzi
- Telaio completamente smontabile senza attrezzi, ingombro ridotto
- Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
- Profondità seduta 450 mm
- Tela schienale morbida, tensionabile, idrorepellente e lavabile in lavatrice a 60°
- Scocca sedile e tela schienale rimuovibili
- Braccioli ergonomici con imbottitura morbida, ribaltabili e regolabili in due altezze
- Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili interno/esterno
- Poggiapiedi ergonomici, ribaltabili, antiscivolo con cinturini ferma talloni
- Maniglione ridotto per agevolare il trasferimento su WC
- Versione standard con 4 ruote piroettanti da 5", frenanti con blocco
- Pulizia facilitata grazie alle superfici uniformi e i profili lisci
- Multi accessorabile

La famiglia Ocean è disponibile:

- nella versione standard con **ruote da 5"**
- nella versione ad autospinta con **ruote da 24"** ad estrazione rapida, mantenendo le 4 ruote piccole
- nella **versione XL** con una portata massima di 150 kg per pazienti bariatrici
- il **kit di ruote da 24"** può essere montato sulla sedia con ruote da 5"



Ocean con ruote da 24"
Ruote ad estrazione rapida da 24" e ruote da 5".



Regolabile in altezza senza attrezzi.



Telaio completamente smontabile.

Aquatec Ocean Vip



Sedia per WC e doccia basculante

- Seduta basculante da 0° a 35° tramite pistoni a gas comandati da una singola leva
- Telaio in acciaio inossidabile e anticorrosione
- Telaio completamente smontabile senza attrezzi
- Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
- Tela schienale morbida, idrorepellente, tensionabile e lavabile in lavatrice a 60°
- Scocca sedile e tela schienale rimovibili
- Braccioli con imbottitura morbida, ribaltabili e regolabili in altezza
- Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili interno/esterno
- Poggiatesta ribaltabili antiscivolo con cinturini ferma talloni
- Ruote da 5" piroettanti: 3 con freno e blocco, 1 con blocco direzionale
- Poggiatesta, multiregolabile in continuo

La famiglia delle sedie da doccia Ocean Vip è disponibile:

- nella versione standard con ruote da 5"
- nella versione standard con ruote da 5" con feritoia
- nella versione standard con feritoia e seduta morbida
- compatibile con braccioli XL (vedi la sezione degli accessori)



Basculamento seduta
Angolo del sedile 0° - 35°.



Maniglia per basculamento
Basculamento seduta con pistone a gas tramite apposita maniglia posta sullo schienale.



Poggiatesta
Regolabile in altezza e profondità (di serie).



Freno direzionale



Tela schienale
Tela morbida con cinghie regolabili.



Aquatec Ocean Dual-Vip

Sedia per WC e doccia basculante e con schienale reclinabile.

Stesse caratteristiche della sedia da doccia **Ocean VIP** con l'aggiunta di:

- inclinazione dello schienale, regolabile da 10 a 50° tramite pistoni a gas comandati da una singola leva
- dispositivo antiribaltamento di serie



Sedile 0° Schienale 25°.



Sedile completamente reclinato a 35° e schienale a 50°.



Antiribaltamento incluso.



Aquatec Ocean E-Vip

Stesse funzionalità della famiglia di sedie da doccia Ocean, ma con l'aggiunta di:

- regolazione elettrica in continuo dell'altezza da 500 a 1050 mm
- regolazione elettrica combinata della seduta da -5° a 35° e dello schienale
- cintura pelvica imbottita e poggiatesta di serie

La sedia da doccia E-Vip è disponibile:

- nella versione standard con ruote da 5"



Movimenti

Sedie da doccia posizionata all'altezza massima e al massimo grado di inclinazione.



Pacco batterie



Pulsantiera ergonomica

Accessori della gamma Ocean



Sedile imbottito morbido

Sedile sagomato imbottito per un maggiore comfort per chi deve rimanere a lungo seduto sulla sedia.

16341 Ocean / Ocean XL / Ocean E-VIP

1470075 Ocean VIP / Dual-VIP



Tappo per sedile morbido

Chiude il foro del sedile facendo corpo unico con la seduta.

16343 Ocean / Ocean VIP / Dual-VIP / Ocean E-VIP



Sedile imbottito foro ovale

Ideale per persone dalla corporatura esile o per il bambino.

16342 Ocean / Ocean VIP / Dual-VIP / Ocean E-VIP



Paraspruzzi

Blocca gli schizzi durante le funzioni corporee.

16511 Ocean / Ocean VIP / Dual-VIP / Ocean E-VIP



Sedile universale morbido

1526032 Ocean / Ocean VIP / Dual-VIP / Ocean E-VIP.



Sedile morbido ergonomico

Particolarmente morbido:

1531259 Ocean / Ocean XL / Ocean VIP / Dual-VIP.



Barra di sicurezza

Sicurezza extra per persone che hanno la tendenza a scivolare lateralmente o in avanti.

10167-10 Ocean / Ocean VIP / Dual-VIP (lunghezza 540 mm).

1470078 Ocean XL (lunghezza 620 mm).



Cinture di sicurezza

Per garantire un maggiore controllo del tronco, facili da posizionare:

1470081 Cintura pettorale, grigia

1470082 Cintura pelvica, grigia. Lavabile in lavatrice.



Blocco dei braccioli

I braccioli rimangono fissi nella posizione abbassata. Indicato per utenti soggetti a spasmi.

1470077 per tutti i modelli.



Schienale XL

Schienale più largo di 80 mm¹: **1534979** per tutti i modelli.



Bracciolo allargato

Bracciolo sagomato per aumentare la larghezza (+ 80 mm) al livello del tronco:

1470086 (paio) per **Ocean / Ocean VIP / Dual VIP / Ocean E-VIP.**



Set ruote da 24"

Per trasformare la sedia a spinta in autospinta: set ruote completo di freni ed attacchi.

16379 Ocean

1/ Disponibile prossimamente

Accessori della gamma Ocean



Supporto amputato

Imbottito e regolabile in altezza e in angolazione

16616 per **Ocean / Ocean XL** (sinistro e destro).

1470083 sinistro per **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip e Ocean, E-Vip.**

1470827 destro per **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip e Ocean E-Vip.**



Poggiagambe imbottito

Doppio cuscino, morbido che funge da poggiatesta. Regolabile in altezza e angolazione. Può essere fissato su ambo i lati.

16615 Ocean.

1470828 (destro) **Ocean VIP / Dual-VIP / Ocean.**

1470084 (sinistro) **E-Vip.**



Vaschetta WC con coperchio

Sagomata per essere facilmente inserita e tolta dalla sedia.

10230 Ocean / Ocean VIP / Ocean E-VIP vaschetta WC

16335 Ocean supporto vaschetta.

1470076 Ocean VIP supporto vaschetta.

1471233 Ocean E-VIP supporto vaschetta.



Poggiatesta / poggiacollo (in figura):

1531465 Poggiatesta per **Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.**

1531608 Poggiacollo per **Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.**

Dati tecnici


Codice prodotto	Aquatec Ocean ¹	Aquatec Ocean ruote da 24" ¹	Aquatec Ocean XL ¹
Sedia da doccia con ruote da 5"	7.10.900		7.13.900
Sedia da doccia con ruote da 24"		7.12.900	

Dimensioni			
Larghezza seduta	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)
Profondità seduta	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Altezza seduta	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)
Larghezza totale	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)
Profondità totale	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)
Altezza totale	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)
Profondità senza poggiatesta	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)
Profondità portapedane	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)
Altezza poggiatesta - sedile	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)
Altezza da terra al sedile:			
con vaschetta WC	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)
senza vaschetta WC	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)
Distanza sedile - braccioli	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)
Larghezza tra i braccioli	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)
Distanza dai braccioli al foro	205 mm	205 mm	205 mm
Profondità dal foro a fine sedile	320 mm	320 mm	320 mm
Regolazione in altezza, a passi di	25 mm	25 mm	25 mm
Ø Ruote	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Ruote autospinta	-	24" (610 mm)	-
Larghezza tra le ruote da 24"	-	540 mm (N)	-


Maggiori informazioni			
Peso	14.5 Kg	19.5 Kg	14.5 Kg
Portata	130 Kg	130 Kg	150 Kg
Colore	Bianco	Bianco	Bianco

^{1/} Cinturini fermatallon di serie. Vaschetta WC e supporto non inclusi.


Ocean con ruote

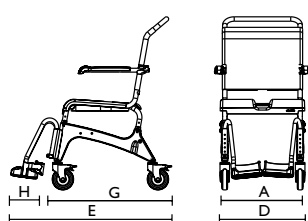

Ocean con ruote da 24"

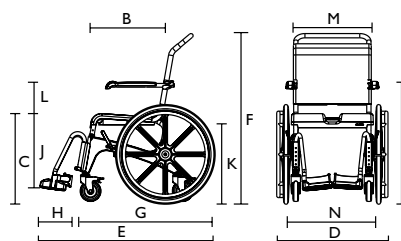



Ocean XL

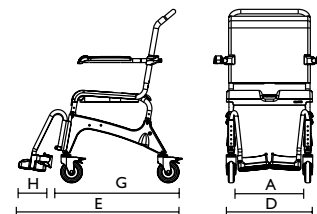

Dati tecnici

Codice prodotto	Aquatec Ocean Vip con basculamento seduta	Aquatec Ocean Vip XL con basculamento seduta	Aquatec Ocean Dual Vip con basculamento seduta e inclinazione schienale	Aquatec Ocean E-Vip
Sedia da doccia con ruote da 5"	1470000	1470788	1470829	1471208
Sedia da doccia con ruote da 5" con feritoia ¹	1470712			1522373
Sedia da doccia con ruote da 5" con feritoia ¹	1470713			
Dimensioni				
Larghezza seduta	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Profondità seduta	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Altezza seduta	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Larghezza totale	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Profondità totale	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Altezza totale senza poggiatesta regolabile	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1150 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Profondità senza poggipiedi	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Profondità portapedane	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Altezza poggia piedi - sedile	350 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Altezza da terra al sedile:				
con vaschetta WC	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
senza vaschetta WC	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	4.5 - 1015 mm (K)
Distanza sedile - braccioli	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Larghezza tra i braccioli	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Angolo della seduta	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Angolo dello schienale	-	-	10° - 50°	-
Regolazione in altezza, a passi di	50 mm	50 mm	50 mm	in continuo
Ø Ruote	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Maggiori informazioni				
Peso	23.5 Kg	23.5 Kg	28.3 Kg	39 Kg
Portata	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco

1/ Vaschetta WC a parte

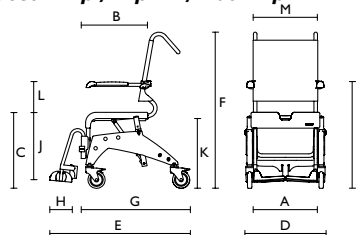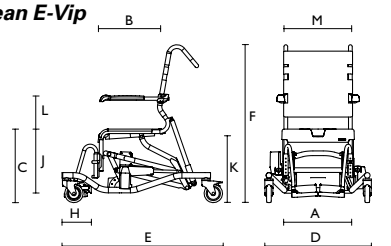Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

Ocean E-Vip

Caratteristiche delle sedie da doccia Aquatec Ocean

	Ocean Transit	Ocean ruote da 24"	Ocean XL	Ocean VIP	Ocean Dual-VIP	Ocean E-VIP
Codici NT	09.12.03.003 + codici ISO aggiuntivi	09.12.03.003 + 09.12.03.103 + codici ISO aggiuntivi	09.12.03.003 o 09.12.03.103 + codici ISO aggiuntivi	09.12.03.003 + codici ISO aggiuntivi	09.12.03.003 + codici ISO aggiuntivi	09.12.03.003 + codici ISO aggiuntivi
Nr. repertorio DM	110434/R	110434/R	110434/R	110457/R	110457/R	110457/R
Sedile forato	●	●	●	●	●	●
Schienale tensionabile	●	●	●	●	●	●
Ruote da 24"		●				
Basculamento seduta				●	●	●
Schienale inclinabile					●	
Regolazione altezza						●

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI